

# Gebruiksaanwijzing

## SWASH<sup>®</sup> CLEANSING WIPES 48 & 24-pack

Product code: L05012-48 (UDI-DI: 08717127938216) / M05012-48 (UDI-DI: 08717127938223)  
/ M05012-24 (UDI-DI: 08720663610485)


**Gebruiker:** professioneel gebruik of zorgverlener

### Beoogd gebruik:

Vochtige doekjes bedoeld voor de primaire reiniging van incontinentie bij incontinenten en / of bedlegerige patiënten als een maatregel ter preventie van infectie.

### Ondersteunende materialen:

- Incontinentieproducten (indien nodig)
- Schone kleding en/of linnengoed (indien nodig)
- Afvalbak
- Wegwerpwashandjes

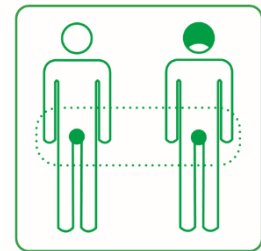

### Gebruiksaanwijzing:

Reinig het vuile gebied met voldoende vochtige doekjes. Gebruik het hersluitbare etiket om de verpakking na elk gebruik te sluiten. Dit garandeert dat de doekjes niet uitdrogen. Een verpakking altijd voor slechts één persoon gebruiken.

### Gedetailleerde procedure:

De Swash<sup>®</sup> Cleansing Wipes kunnen op de afdeling op een centrale plek of naast het bed van de zorgvrager worden opgeborgen.

- 1 Informeer de zorgvrager wat je gaat doen en blijf communiceren tijdens de gehele procedure
- 2 Voorafgaand, was uw handen en trek een paar wegwerphandschoenen aan. Raadpleeg het huidige handhygiëne protocol voor meer informatie.
- 3 Laat de zorgvrager in rugligging liggen met een kussen onder zijn / haar hoofd. Laat de zorgvrager zijn bovenkleding uittrekken; indien nodig, help/ondersteun de zorgvrager hierbij. Houd rekening met de privacy van de zorgvrager.
- 4 Verwijder nat en vuil incontinentiemateriaal.
- 5 Open de verpakking met Swash<sup>®</sup> Cleansing Wipes en haal een doekje eruit. Was de genitaliën met een Swash<sup>®</sup> Cleansing Wipe. Gebruik zoveel doekjes als nodig zijn. De huid droogt vanzelf door het verdampen van de lotion. Indien nodig de huidplooiën nadrogen door te deppen met een tissue.
- 6 Reinig het vuile perineumgebied (de billen en het stuitbeen) van de zorgvrager met een Swash<sup>®</sup> Cleansing Wipe. Gebruik zoveel doekjes als noodzakelijk voor het verwijderen van alle ontlasting en / of urine van de huid. Plaats de gebruikte Swash<sup>®</sup> Cleansing Wipes bij voorkeur in het incontinentiemateriaal.
- 7 Als de zorgvrager het risico loopt om incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) te krijgen of als de IAD moet worden behandeld, ga dan verder met het protocol "Swash<sup>®</sup> Perineum Gloves" / "Swash<sup>®</sup> Perineum Wipes" of "Swash<sup>®</sup> Perineum+ Wipes".
- 8 Inspecteer het perineumgebied op incontinentie-geassocieerde dermatitis en andere variabelen van de huidaanandoening.
- 9 Meld eventuele veranderingen van de conditie van de huid na het wassen.
- 10 Geef de zorgvrager nieuw, schoon en droog incontinentiemateriaal. Verander het beddengoed als het nat of vuil is en kleeft de zorgvrager opnieuw aan en help hem / haar in de gewenste positie.
- 11 Gooi het lege pakketje Swash<sup>®</sup> en de doekjes in de vuilnisbak. SPOEL DE SWASH<sup>®</sup> CLEANSING

## WIPES NIET DOOR HET TOILET!

- 12 Herhaal deze procedure na elke urine- of fecale incontinentie-episode.

### Waarschuwing:

- Houd te allen tijde rekening met de behoeften en gevoelens van de patiënt.
- Ieder pakketje dient persoonsgebonden te worden gebruikt. De overige doekjes mogen voor dezelfde zorgvrager worden gebruikt.
- Spoel de doekjes niet door het toilet. Gooi het lege pakketje Swash® en de doekjes in de vuilnisbak.
- Alleen geschikt voor uitwendig gebruik.

### CONTRA-INDICATIES:

- Als de zorgvrager het gebruik hiervan weigert
- Als bekend is dat de zorgontvanger gevoelig of allergisch is voor een of meerdere ingrediënten
- Op niet-intacte huid & open wonden



## PICTOGRAMMEN OP HET PAKKETJE:

	Beperking temperatuur		Gebruik binnen 1 maand na opening
	Verwijderd houden van zonlicht		Gooi maar in de vuilnisbak.
	Droog houden		Niet macereren
	Niet gebruiken indien de verpakking is beschadigd		Product vrij van latex
	Niet hergebruiken		Geproduceerd in een clean room
	Niet-steriel		Het product bevat geen parfum
	Medisch hulpmiddel		Het product bevat parfum
	CE-markering		Niet doorspoelen
	Batchcode		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Fabrikant		
	Te gebruiken tot datum		
	Unieke identificatiecode		

*De informatie in dit protocol heeft specifiek betrekking op het gebruik van Swash® Cleansing Wipes voor het reinigen van het perineumgebied van incontinentie zorgontvangers. Additionele interventies en stappen kunnen aan dit protocol worden toegevoegd naargelang andere protocollen en richtlijnen in uw zorginstelling.*

Arion Manufacturing B.V. • Rutherford 11 • 6422 RE Heerlen, the Netherlands  
+31 (0)45 209 4000 • manufacturing@arion-group.com • www.arion-group.com